


Date d'édition : 07.06.2026

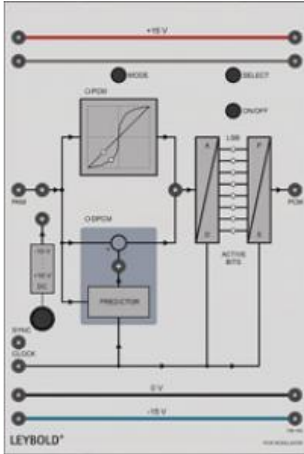

Ref : 736102

Modulateur PCM / DPCM

Dans le modulateur PCM (MIC), le signal échantillonné, à valeurs discrètes en temps, est quantifié et codé. À partir du signal d'entrée analogique du modulateur PAM, on obtient un signal entièrement numérique (à valeurs discrètes en temps et en amplitude). Le modulateur PCM permet l'étude de la quantification linéaire et non linéaire. La plaque sert en outre à étudier les signaux DPCM (modulation MIC différentielle).

Convertisseur A/N 8 bits  
LED pour l'affichage parallèle de tous les bits actifs  
Convertisseur parallèle/série  
Compresseur 13 segments  
Prédicteur  
Commande du signal d'horloge  
Source de tension CC pour essais de codage


Caractéristiques techniques :  
Résolution : max. 8 bits, tous les bits sont désactivables individuellement  
Prédiction (DPCM) : Previous Sample Prediction  
Source de tension CC : -10 V ... +10 V, avec potentiomètre à dix tours  
Tension d'entrée : -10 V ... +10 V  
Sortie : niveau TTL  
Tension d'alimentation :  $\pm 15$  V CC

## Options

Date d'édition : 07.06.2026

**Ref : 736061**

## **Modulateur d'impulsions en amplitude (PAM)**

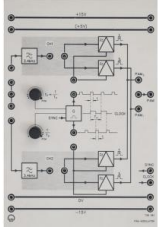

La modulation d'impulsions en amplitude (PAM) est réalisée par échantillonnage d'un signal analogique. Elle est l'étape préalable à la génération de signaux PCM (MIC).

La modulation d'impulsions en amplitude fournie est une modulation à échantillonnage naturel.

Pour une modulation à échantillonnage régulier, un étage d'échantillonnage et de maintien supplémentaire est nécessaire.

La plaque comporte toutes les unités nécessaires à la réalisation d'un système de multiplexage temporel à deux canaux :

2 filtres anticrénelage

2 échantillonneurs

2 étages d'échantillonnage et de maintien

1 commande de multiplexage.

Grâce à un rapport cyclique variable et à une fréquence d'échantillonnage sélectionnable, il est possible d'effectuer des mesures de trains d'impulsions similaires à celles réalisées dans la pratique.

Vérification du théorème d'échantillonnage de Shannon avec représentation d'un sur-échantillonnage et d'un sous-échantillonnage.

Étude de la commande de multiplexage possible en mode bicanal.

Caractéristiques techniques :

Fréquence de coupure des filtres passe-bas : 3,4 kHz

Fréquence d'échantillonnage : 1 kHz ... 10 kHz

Rapport cyclique : 0,1 ... 0,9

Tension d'entrée : -10 V ... + 10 V


Sorties : PAM1, PAM2, générateur d'horloge

Tension d'alimentation : +/- 15 V CC

Date d'édition : 07.06.2026

**Ref : 736071**

## Démodulateur PAM

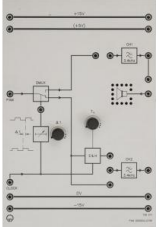

Grâce à leurs propriétés spectrales, les signaux PAM sont démodulés par des filtres passe-bas. Un étage d'échantillonnage et de maintien est souvent branché en amont pour augmenter le rapport cyclique. La plaque comporte toutes les unités de réception nécessaires à la réalisation d'un système de multiplexage temporel à deux canaux :

- 2 filtres passe-bas démodulateurs
- 1 étage d'échantillonnage et de maintien
- 1 commande de démultiplexage.

La plaque comporte également un haut-parleur connectable qui permet une étude acoustique des effets de l'échantillonnage.

Caractéristiques techniques :

Fréquence de coupure des filtres passe-bas : 3,4 kHz

Rapport cyclique : 0,1 ? 0,9


Tension d'entrée : -10 V ? +10 V

Sorties : canal 1, canal 2, générateur d'horloge

Tension d'alimentation :  $\pm 15$  V CC

**Ref : 736112**

## Démodulateur PCM / DPCM

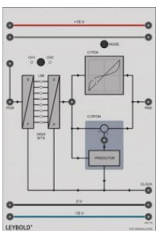

Le démodulateur PCM reçoit en série les données et le signal d'horloge transmis via une ligne de données commune (canal de transmission) par le modulateur PCM.

Le démodulateur PCM reconvertit le flux de données reçu en un signal PAM.

Combiné au compresseur du modulateur PCM, le démodulateur PCM permet la réalisation d'essais de compression et d'expansion.

La plaque sert également à la démodulation de signaux DPCM.

La plaque comprend les éléments suivants :

- Convertisseur série/parallèle
- LED pour l'affichage parallèle des bits de niveau haut
- Expansur 13 segments
- Convertisseur N/A
- Prédicteur

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
systemes-didactiques.fr



# Systemes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 07.06.2026

Caractéristiques techniques :

Prédiction (DPCM) : Previous Sample Prediction

Tension d'entrée : niveau TTL

Sortie : -10 V ? +10 V

Tension d'alimentation :  $\pm 15$  V CC