

Date d'édition : 22.01.2025



Ref : EWTGUWP400.50

**WP 400.50 Cage de protection pour mouton pendule  
(Réf. 020.40050)**

Ce revêtement protecteur est un accessoire conçu pour l'appareil d'essai WP 400.

Le marteau oscillant ou une éprouvette de choc présentent un danger potentiel pendant l'essai de résilience.

Le revêtement protecteur est fortement recommandé en tant que dispositif de sécurité pour la réalisation d'essais de résilience.

Le revêtement protecteur est vissé à l'appareil d'essai WP 400 et forme un environnement de travail protégé pour la réalisation d'essais.

Une porte située dans le revêtement protecteur permet d'accéder à la zone de travail.

Deux poignées facilitent le transport de l'appareil d'essai.

Contenu didactique / Essais

Les grandes lignes

dispositif de sécurité pour les essais de résilience sur le WP 400

Les caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Lxlxh: 1100x300x1100mm

Poids: env. 15kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 Cage de protection

Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm


Options

Date d'édition : 22.01.2025

Ref : EWTGUWP400

**WP 400 Essai de résilience 25Nm, Mouton Pendule de Charpy (Réf. 020.40000)**

Eprouvettes avec de sections et matériaux différents

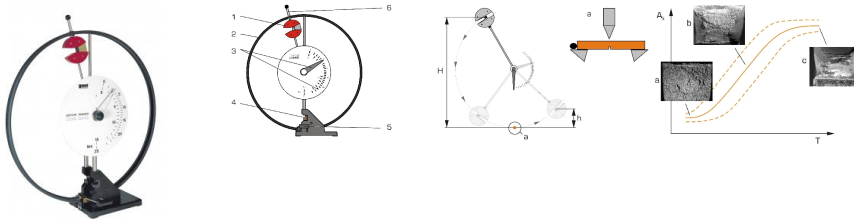

Dans le contrôle qualité industriel, lessai de résilience est un essai très répandu.

Il permet de déterminer rapidement et simplement des valeurs caractéristiques pour l'évaluation de matériaux ou de composants.

L'appareil d'essai WP 400 est un mouton pendule solide suivant la DIN EN ISO 148-1, qui a été conçu pour la réalisation d'essais de résilience Charpy.

Grâce à la clarté du montage et à la facilité d'utilisation, on peut observer tous les détails et les phases de l'essai.

Lors de l'essai, un mouton fixé à un bras de pendule décrit, une fois déclenché, un arc de cercle.

Au point le plus bas de la trajectoire du mouton, ce dernier transmet une partie de son énergie cinétique à l'éprouvette entaillée.

Lors de l'impact, l'éprouvette est soit détruite, soit déformée par le choc et entraînée entre les appuis.

L'énergie de choc nécessaire à la déformation de l'éprouvette est lue directement sur une échelle de grande taille.

Avec le système d'acquisition de données WP 400.20, il est possible de transmettre les valeurs de mesure sur un PC où elles pourront être évaluées à l'aide du logiciel.

Afin de varier l'énergie de départ, on peut modifier la masse du mouton, en ajoutant ou retirant des poids.

Un frein réduit l'énergie résiduelle du mouton à chaque oscillation par le point zéro.

Un anneau de protection assure une réalisation des essais en toute sécurité; il sert également à fixer le mouton.

Pour une utilisation sécurisée, le mouton s'active avec deux mains.

Un revêtement de protection de la zone de travail WP 400.50 est disponible en tant qu'accessoire.

Les résultats des essais assurent le contrôle qualité et l'évaluation du comportement de rupture de différents matériaux métalliques.

Des éprouvettes non métalliques peuvent également être utilisées.

Des éprouvettes de géométries dentailées, dimensions et matériaux différents, sont comprises dans la liste de livraison.

Contenu didactique / Essais

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température
- influence de la forme de l'entaille, du matériau et de la température de l'éprouvette sur l'énergie de choc

Les grandes lignes

- essai de résilience Charpy
- méthode classique de lessai destructif des matériaux pour le contrôle qualité et l'évaluation du comportement de rupture des matériaux métalliques
- mouton pendule suivant la DIN EN ISO 148-1

Les caractéristiques techniques

Mouton pendule

- capacité de travail
- 15Nm
- 25Nm (avec poids supplémentaires)

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
systemes-didactiques.fr



Date d'édition : 22.01.2025

- mouton
- poids: 2,05kg et 3,42kg (avec poids supplémentaires)
- poids supplémentaires: 4x 0,342kg
- vitesse d'impact: 3,8m/s
- hauteur de chute: 745mm

Appuis pour éprouvettes  
- distance: 40mm

Éprouvettes de choc  
- Lxl: 10x5mm, 10x10mm  
- section au fond de lentaille: 10x8 et 10x5mm

Matériaux des éprouvettes  
- acier de décolletage 9SMn28K  
- acier de traitement C45k  
- acier de construction S235JRC+C  
- laiton CuZn40Pb2

Dimensions et poids  
Lxlxh: 1000x300x1000mm  
Poids: env. 55kg

Liste de livraison  
1 appareil de essai  
1 jeu de poids supplémentaires  
1 jeu d'éprouvettes de choc (90 unités)  
1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options  
WP400.01 - 10 échantillons ISO-V en acier de construction, 5mm  
WP400.02 - 10 échantillons ISO-V en laiton, 5mm  
WP400.03 - 10 échantillons ISO-V en laiton, 10mm  
WP400.04 - 10 échantillons ISO-U en acier de décolletage, 5mm  
WP400.05 - 10 échantillons GUNT-R7 en acier de décolletage, 5mm  
WP400.06 - 10 échantillons GUNT-R5 en acier de