

Date d'édition : 27.04.2026



Ref : EWTFOFCH-020

Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures EWTOLWH22-10L-5

L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.

Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.

L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5) sous forme d'hydrure métallique.

Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm

Poids : 1,8 kg

Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)

Consommation d'eau : env. 20 ml/h

Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar

Production de gaz : jusqu'à 3 l/h

Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %

Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures

Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :

1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:

Cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5)

Options

Date d'édition : 27.04.2026

Ref : EWTOLWH22-10L-5

Réservoir hydrogène en hydrure métallique pour électrolyseur HydroStik PRO



Permet le stockage de l'hydrogène de manière simple et en toute sécurité, par ex. pour une utilisation dans des piles à combustible.

La cartouche HydroStik PRO peut stocker 0,9 g d'hydrogène sous forme d'hydrure métallique. Elle se recharge aisément avec le générateur d'hydrogène HydroFill PRO (EWTFOFCH-020).

Caractéristiques techniques :

Charge : 10 l (env. 0.9 g d'hydrogène)

Pression de remplissage max. : 3.0 MPa (20 °C)

Pression de prélèvement : 0 ... 3.0 MPa (25°C)

Connexion : taraudage M6


Dimensions : diamètre : 22 mm, hauteur : 88 mm

Masse : 0,09 kg

La cartouche HydroStik PRO est livrée vide.

Ref : EWTLE1222

Valise de TP's Pile à combustible H2 Professional 2.0

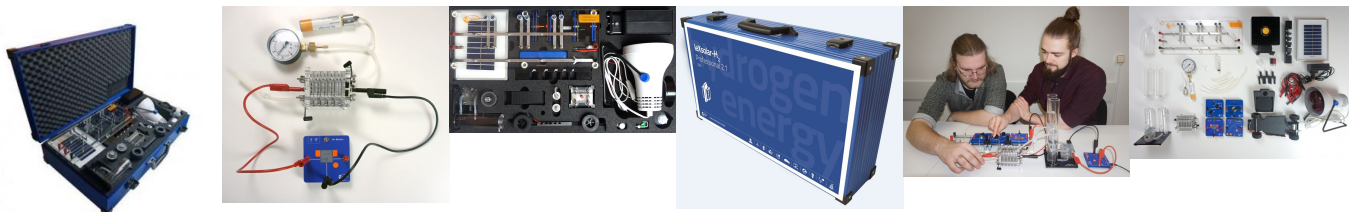

Le H2 Professional 2.0 est un excellent kit d'expérimentation permettant à tous les étudiants d'étudier la technologie de la production et l'utilisation de l'hydrogène.

Le H2 Professional peut être utilisé pour la formation de base et pour Etudes avancées.

Le procédé d'électrolyse fonctionne soit avec le module solaire pour la production d'hydrogène vert, ou avec

courant principal pour l'hydrogène gris.

Nous avons opté pour une nouvelle version d'une pile à combustible, qui peut être complètement démontée en cellules individuelles.

Des expériences sont donc possibles avec la pile et les cellules individuelles.

La pile à combustible a une puissance maximale de 1 W.

Le fonctionnement de la pile à combustible est possible avec l'électrolyseur ou avec le module de stockage H2.

De plus, nous avons intégré un ventilateur pour analyser l'effet de cheminée et l'oxygène sur le fonctionnement de la pile à combustible.

Enfin, nous avons ajouté un nouveau châssis de voiture pour une démonstration de véhicule électrique à pile à combustible.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 27.04.2026

Exemples d'expériences :

Production d'électricité avec module photovoltaïque
Production d'hydrogène avec l'électrolyseur
Efficacité de l'électrolyseur
Production d'hydrogène vert
Fonctionnement d'une pile à combustible
Schéma caractéristique de l'opération pile à combustible
Utilisation de l'hydrogène de la pile FC
Production d'hydrogène par électrolyse.
Graphique U-I de l'électrolyse.
Mise en service de la pile à combustible.
Caractéristiques de performance de la pile à combustible.
Étude de l'effet de cheminée d'une pile à combustible.
Consommation d'hydrogène d'une pile à combustible.

Exemple d'expériences en lien avec des applications réels:

Montage avec stockage par hydrure métallique
Contrôle détaché d'un stack
Utilisation d'un stack avec et sans ventilateur
Application sur un véhicule électrique

Liste des composants:

1x 1118-02 Module moteur Pro
1x 1100-04 Module solaire 5,33 V, 370 mA
1x 1100-62 Module potentiomètre 110 Ohm Pro
1 x 1118-17 Socle pour panneau solaire
1x 1200-18 Stockage H2
1 x 1222-01 Mallette en aluminium 1222
1 x 1222-02 montage manomètre 1 bar
1 x 1400-13 unité de base leXsolar Professional
1x 1400-19 Ventilateur
1 x 1800-15 Eau distillée (100 ml)
1x 9100-03 Module AV mesure Courant / Tension
1x 9100-05 Module d'alimentation
1 x L2-01-126 Support pour la pile BSZ
1x L2-02-017 Hélice
0,25 x L2-02-088 Tuyau silicone diamètre interne 4mm externe 6mm
0,15 x L2-02-048 Tube silicone 2 mm
1 x L2-02-083 Y-interrupteur 4mm
2 x L2-04-059 Cordon de sécurité, 50 cm, rouge
3 x L2-04-060 Cordon de sécurité, 50 cm, noir
1x L2-04-080 Boîtier de lampe
1 x L2-04-200 Illuminant infrarouge 230V
3 x L2-05-068 Fiche de court-circuit de sécurité, avec prise intermédiaire
1x L2-05-141 Collier de serrage
1x L2-06-087 Seringue 2 ml
1x L2-06-132 vanne pour stockage H2
1 x L2-06-205 H-Tec 5fach BSZ
1 x L2-06-206 H-Tec Electrolyseur
1 x L2-06-207 H-Tec Auto
1 x L2-06-210 Adaptateur 2mm/4mm rot
1 x L2-06-211 Adaptateur 2mm/4mm noir

Options disponibles :


1x EWTLE1200-17H2 Electrolyseur pour réservoir d'hydrure

Date d'édition : 27.04.2026

Ref : EWTINie3043

Système pile à combustible hydrogène 20 W pour ingénierie piloté par microcontrôleur avec valise V2

Avec ventilateur, capteur température, pression, 2x hydrures, réducteur pression, accessoires

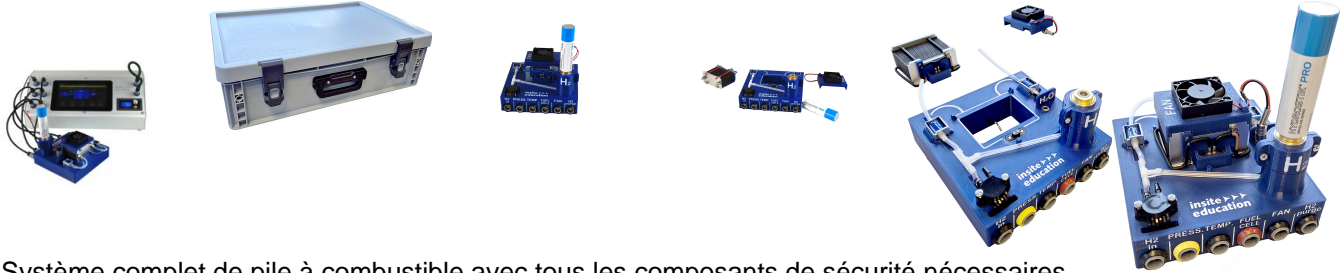

Système complet de pile à combustible avec tous les composants de sécurité nécessaires.

Il permet à l'utilisateur de définir des paramètres manuellement comme la puissance du ventilateur, vanne de purge, relais de charge, courant de charge.

De conception ouverte, transparente et modulaire pour voir et découvrir tous les composants

La pile à combustible ouverte montre tous les raccordements directs, les cellules individuelles, les canaux d'air.

Pour la mise en la pile et le ventilateur sont simplement enfilés sur la plaque de base grâce à des aimants.

L'installation de piles à combustible est montée, prête à l'emploi et démontée en quelques secondes.

Avec pile à combustible interchangeable

La structure modulaire et la conception bien pensée permettent un remplacement rapide de la pile à combustible à étudier.

Comprenant:

- Pile 20 W (7.8 à 2.6 A), 13 cellules avec ventilateur intégré et capteur de température
- Electrovanne arrivée hydrogène
- Electrovanne de purge
- Capteur de pression
- 2x Réservoir d'hydrure métallique 10 NI
- Réducteur de pression
- Commande de la pile par microcontrôleur avec écran tactile intégré:
 - Affichage des valeurs instantanées, courbes en fonction du temps
 - Influences de commande manuelle (puissance du ventilateur, vanne de purge, fonction de veille, courbes caractéristique UI...)
- Fonction d'arrêt et affichage des erreurs
- Charge électronique à commande manuelle
- Support de pile avec gestion thermique de l'hydrure
- Accessoires (câbles et tuyaux)
- Logiciel, connexion au PC par WiFi
- Accessoires (câbles et tuyaux)

Avec valise de rangement en aluminium,

Accessoires nécessaire:

EWTINFCH-020 Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures

Produits alternatifs

Date d'édition : 27.04.2026

Ref : EWTLE1200-17

Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures EWTLE1200-18

L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.

Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.

L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5 - EWTLE1200-18) sous forme d'hydrure métallique.

Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm

Poids : 1,8 kg

Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)

Consommation d'eau : env. 20 ml/h

Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar

Production de gaz : jusqu'à 3 l/h

Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %

Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures

Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :

1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:

Cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5)

Ref : EWTOLFCH-020

Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures EWTOLWH22-10L-5



L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.

Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.

L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWTOLWH22-10L-5) sous forme d'hydrure métallique.

Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm

Poids : 1,8 kg

Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)

Consommation d'eau : env. 20 ml/h

Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 27.04.2026

Production de gaz : jusqu'à 3 l/h
Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %
Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures
Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :
1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:
Cartouche HydroStik PRO (EWTINHLWH22-10L-5)

Ref : EWTINFCH-020

Electrolyseur HydroFill PRO pour remplissage des hydrures EWTINHZLWH22



L'HydroFill PRO fournit de l'hydrogène obtenu par électrolyse à partir d'eau distillée.
Il suffit simplement d'avoir une prise électrique pour le branchement.
L'hydrogène est directement stocké dans la cartouche HydroStik PRO (EWTINHLWH22-10L-5) sous forme d'hydrure métallique.
Il est ainsi possible de travailler avec l'hydrogène sans avoir à utiliser de bouteilles de gaz comprimé, par ex. pour la réalisation d'expériences avec les piles à combustible.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 145 mm x 153 mm x 208 mm
Poids : 1,8 kg
Eau utilisable : eau désionisée ou distillée (10 ... 40°C)
Consommation d'eau : env. 20 ml/h
Pression de prélèvement : 0 ... 2,8 MPa / 0...2.8 bar
Production de gaz : jusqu'à 3 l/h
Pureté de l'hydrogène produit : 99,99 %
Temps de chargement d'une cartouche HydroStik PRO : env. 4 heures
Tension d'alimentation: 10...19 V CC

Matériel livré :
1 HydroFill PRO 1 adaptateur CA(230V) -CC

En option:
Cartouche HydroStik PRO (EWTINHLWH22-10L-5)